

IT

APRILE
2023

PRODONTO CONSUMABLES

LINEA CONSERVATIVA

COMPOSITI, ADESIVO,
MORDENZANTE



PRODONTO
Signature
SERIES

PRODONTO

Conservativa Prodonto
Signature. Quello che
conta è la formula.



Quando le performance fanno la differenza.



Semplificazione.

Ridurre tempi di trattamento, lavorare con semplicità

Razionalizzazione.

Confezionamenti e assortimento pensati per evitare sprechi, gamma colori razionale e completa



Performance.

Permettere al vostro potenziale di esprimersi al meglio



risultati terapeutici e di Business.

Convertire in valore ogni passo fatto nella direzione dell'eccellenza.

Signature significa aumentare i risultati in tutti i campi

Migliorare i prodotti è un impegno costante di ogni azienda. Per noi *migliorare* significa *firmare* i nostri prodotti con la filosofia che seguiamo e promuoviamo. La nostra linea d'eccellenza si chiama infatti *Prodonto Signature* ed i prodotti che ne fanno parte sono pensati e realizzati per aderire ad una equazione. I risultati, siano essi misurati sul piano terapeutico, che sul piano del successo imprenditoriale, sono il prodotto di variabili: **semplificazione - ovvero la capacità di rendere flussi e strutture più efficaci con meno risorse, razionalizzazione - che è l'analisi e l'ottimizzazione dell'efficienza e la performance - ovvero la componente di vantaggio data dall'utilizzare soluzioni d'eccellenza.** I prodotti che compongono il workflow Prodonto Signature Conservativa hanno quella che noi consideriamo essere la migliore combinazione delle variabili in gioco per garantire i migliori risultati.

Conservativa Prodonto Signature. Un workflow integrato per risultati d'eccellenza.



Quattro formulazioni speciali perfettamente integrate.

La linea di conservativa Prodonto signature si compone di 4 prodotti essenziali per una ricostruzione diretta completa. I formati dei prodotti e la gamma di varianti rispondono alle esigenze cliniche dei professionisti così come ai criteri di razionalizzazione degli stock.



Le tre componenti della performance

Elevata resa estetica

Eccellenti caratteristiche
chimico-fisiche

Durata del
restauro
nel tempo

PR@D@NTO
Signature

Perchè avrete grandi risultati da Prodonto Signature?

I nuovi compositi *Prohalo Evo* e *Prohalo Evo Flow* semplificano l'operatività quotidiana e assicurano un'ottima resa estetica e funzionale, sono facili da applicare e di immediato utilizzo. Ad esempio *Prohalo Evo* non collassa, mantiene la forma e non si appiccica allo strumento. Il composito *Prohalo Evo Flow* è altamente versatile e può coprire un'ampia gamma di applicazioni e può anche essere utilizzato come vernice riducendo al minimo le operazioni di rifinitura. *Prokleep Evo* grazie alla sua composizione riduce la sensibilità post operatoria.

Composito ProHalo evo

Composito nanoibrido e fotopolimerizzabile



Composito nanoibrido e fotopolimerizzabile, progettato per i restauri diretti di tutte le classi di cavità dei settori anteriori e posteriori. Consistenza ottimizzata offre un perfetto equilibrio tra durezza e lavorabilità senza appiccicarsi agli strumenti.

Dentina*



DA2 DA3 DA35

Smalto*



EA1 EA2 EA3 EA3,5



La combinazione semplificata delle masse consente di soddisfare la maggior parte delle esigenze estetiche

1

Lavorabilità ottimale, non collasa e non perde la forma che gli è stata conferita (molto importante nella ricostruzione di cuspidi). Eccezionale facilità di posizionamento.

2

Facilità di lucidatura e rifinitura per creare una superficie liscia e brillante (*maggiore stabilità del colore*) il clinico può notare immediatamente la durezza e resistenza del composito.

3

Brillantezza di lunga durata (*la brillantezza si riferisce alla capacità del composito di riflettere la luce in modo simile ai denti naturali creando un aspetto uniforme e naturale*).



4

Radiopacità elevata (250 x AI (%) + radiopaco della dentina) che permette la rilevazione ai raggi x ma allo stesso tempo permette una distinzione tra composito e dentina x monitorare la salute del dente .

Vantaggi



Vantaggi durante il trattamento

- | Lavorabilità ottimale
- | Facilità di posizionamento
- | Facilità di lucidatura e rifinitura
- | Camaleonticità, opalescenza

Vantaggi a lungo termine

- | Brillantezza di lunga durata
- | Radiopacità elevata
- | Risultati estetici
- | Elevata resistenza all'usura
- | Perfetta estetica nel tempo

(la luce si diffonde uniformemente e la superficie appare lucida e conserva brillantezza, ha la stessa rifrazione della luce uguale alla dentina che lo rende invisibile)

5

Grazie ad un sistema di riempitivi si integra in modo ottimale con il dente offrendo la stessa fluorescenza e opalescenza dei tessuti naturali.

6

Elevata resistenza all'usura e ai danni causati dall'uso quotidiano (come *masticare e spazzolamento dei denti*) e proprietà meccaniche durevoli nel tempo e prestazioni cliniche a lungo termine che sono in grado di ripristinare la struttura dentale originale.

7

Elevate prestazioni fisiche: alta resistenza alla compressione , alla flessione e al modulo di elasticità lo rende particolarmente adatto anche per restauri su posteriori.

Composito fluido ProHalo Flow evo

Composito ibrido e fotopolimerizzabile



Composito ibrido e fotopolimerizzabile altamente versatile può essere utilizzato per la realizzazione di restauri di classe III/IV/V. Garantisce inoltre una vasta gamma di impieghi grazie alla sua elevata versatilità.

4 x 1g
+ 20 puntali

Colorazioni*



A2 A3 A3,5

Tips & Tricks


Può essere anche utilizzato come vernice/sigillante per la superficie dei restauri in composito utilizzando la seguente procedura:




- Trattare la superficie con un gommino diamantato per lucidatura



- Applicare una o due gocce di flow

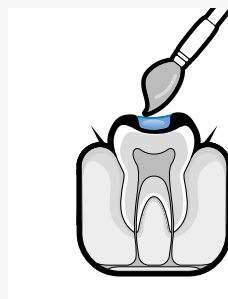

- Distribuire con un pennellino

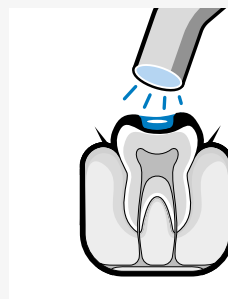

- Fotopolimerizzare



Vantaggi

Vantaggi durante il trattamento

- Facile da applicare
- Scorrevolezza e adattabilità tissotropica

Vantaggi a lungo termine

- Elevata resistenza all'usura
- Resistenza alla compressione alla flessione
- Radiopacità



- Riparazione di difetti dello smalto
- Riparazione di restauri in porcellana
- Build up occlusali in aree non sollecitate
- Sigillante x solchi e fessure
- Cemento x faccette in ceramica o composito
- Ricostruzione monconi.



La fluidità ottimale semplifica l'applicazione del materiale in caso di utilizzo come sottofondo/liner di cavità e riduce al minimo le operazioni di rifinitura.

Adesivo ProKleep Evo

Adesivo smalto dentinale
monocomponente total-etch
fotopolimerizzabile

Ideale per ridurre la
sensibilità post operatoria



flacone da

5 ml




utilizzabile con
tutti i compositi
a base di

Bis-GMA

> 31MPa

La sua esclusiva tecnologia offre un grado di protezione più elevato contro le microinfiltrazioni in quanto crea una superficie liscia e uniforme. La sua formulazione ottimizzata e la percentuale di riempimento pari al 15% - Assicurano una drastica riduzione della sensibilità post operatoria (*questo significa che l'adesivo è stato progettato per ridurre al minimo l'irritazione delle terminazioni nervose presenti nella polpa dentale durante la procedura di adesione*), con un solo passaggio – ha spessore pari a 15 micron- è adatto anche per i lavori estetici in quanto non altera la colorazione del restauro.

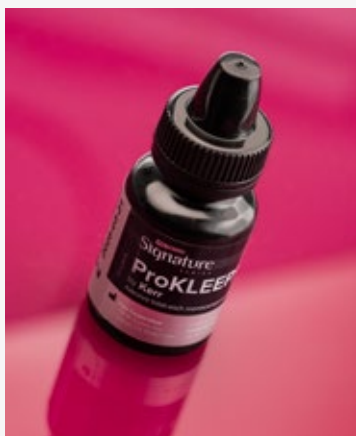

- 1 solo passaggio
- ha spessore pari a 15 micron
- è adatto anche per i lavori estetici in quanto non altera la colorazione del restauro.
- Riduzione sensibilità post-operatoria

La **sensibilità post operatoria** può verificarsi quando l'adesivo penetra nella dentina del dente e irrita le terminazioni nervose presenti nella polpa dentale, causando dolore e sensibilità al caldo, al freddo o alla pressione. Può essere particolarmente fastidioso per il paziente e può richiedere ulteriori interventi per risolvere il problema

Gel ProTixo Evo

Gel a base di acido ortofosforico al 37,5%



3 x 3g

+ 30 puntali

- *Tissotropico*: non cola, né si espande senza il controllo dell'operatore (non tutti i gel hanno questa caratteristica)
- Facile da risciacquare, grazie al trattamento di depolarizzazione che rende la silice non igroscopica.

1 x 30g

+ 2 siringhe vuote da 3g
+ 30 puntali
+ 1 connettore Luer



ProTixo Evo ha una formulazione a base di *acido ortofosforico* al 37,5% e *silice depolarizzata* che aiuta il gel a non appiattire i filamenti di collagene e ad espandersi in modo uniforme sulla superficie del dente. In questo modo si favorisce l'adesione del materiale protesico evitando l'appiattimento dei filamenti di collagene presenti sulla superficie dentale.

Tips & Tricks

Il confezionamento da **30g** razionalizza la gestione delle scorte





PRODONTO SIGNATURE

SET COMPLETO



WORKSET COMPLETO COMPOSTO DA

4x ProHalo EVO



Colore a scelta

2x ProHalo EVO Flow



Colore a scelta

1x ProKleep Evo



1x ProTixo Evo 30g



Siringa da 30g

PROHALO EVO

Composito



Dentina

PROSBY0003DA2

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROSBY0003DA3

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROSBY0003DA35

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

Smalto

PROSBY0003EA1

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROSBY0003EA2

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROSBY0003EA3

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROSBY0003EA35

PROHALO EVO COMPOSITO SIRINGA 4 gr

PROHALO EVO FLOW

Composito fluido



PROSGG0002A2

PROHALO EVO FLOW COMPOSITO 4 SIRINGHE DA 1 gr

PROSGG0002A3

PROHALO EVO FLOW COMPOSITO 4 SIRINGHE DA 1 gr

PROSGG0002A35

PROHALO EVO FLOW COMPOSITO 4 SIRINGHE DA 1 gr

PROTIXO EVO

Mordenzante



PROSB20005

PROTIXO EVO 3 SIRINGHE DA 3 gr

PROSB20004

PROTIXO EVO 1 SIRINGA DA 30 gr

PROKLEEP EVO

Adesivo



PROSB20003

PROKLEEP EVO FLACONE DA 5 ml

Dati tecnici, caratteristiche, allestimenti e immagini possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e non possono quindi essere considerati vincolanti a livello contrattuale. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori riportati su questo documento e per eventuali danni che ne potrebbero derivare. Tutti i diritti sono riservati. I marchi registrati citati sono di proprietà dei rispettivi titolari.